

[Product name] Disposable Nitrile Examination Gloves

[Model] KDN02M (TTC 402383 / TTC 402384 / TTC 402385 / TTC 402386)

[Size] S / M / L / XL

[Features] Latex-free, Powder-free, Protein-free, Ambidextrous, Food Grade, Non-sterile, Single Use, Fingertip Textured, Oil-proof, High Elasticity, Non-toxic, Resistance to Acid

[Product description] Made of nitrile. Sufficient strength and barrier properties. Non-sterile supply, disposable.

[Intended use] It is used to put on doctors' hands for examination or touch examination of patients' condition.

[Usage] Before wearing gloves, remove all ornaments on hands and trim and smooth nails. According to the general standard of surgical disinfection, the hand parts are clear Clean, disinfect and dry. Wear gloves suitable for individual hand size.

Wet hands will make it more difficult to wear.

[Attention]

1. When wearing gloves, do not wear rings or other ornaments, and keep nails trimmed and smooth.

2. Please choose gloves suitable for your own hand size.

3. Do not use damaged gloves.

4. This product is for one-time use only, please destroy it after use.

5. Too high temperature will be very destructive to plastic gloves.

[Storage conditions] Need be stored in a cool, dry, ventilated, non-corrosive dark environment.

[Manufacturer] CRDLIGHT Optoelectronic Technology Co., Ltd.

[Address] Floor 1-5 Building No.7 & Floor 1-4 Building No.5, No.18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China

[Distributor] GATARIC DOO, Kninska 48, 74400 Derventa, Bosnia and Herzegovina (+387 53 315 000)

[Website] www.gataric.net



1 Please cut your nails before wearing gloves, fingernails that are too long or too sharp can easily damage gloves.



2 Before wearing, please use your finger-pulp to avoid scratching the gloves.



3 When taking off, turn up the gloves at the wrist and take them off to the fingers, do not pull out from the fingertip.



Keep dry



Keep away from sunlight



Non-sterile



Latex free



Single use only



Do not use if package is damaged



Refer to the instruction



MADE IN CHINA

[Naziv proizvoda] Nitrilne pregledne rukavice za jednokratnu upotrebu

[Model] KDN02M (TTC 402383 / TTC 402384 / TTC 402385 / TTC 402386)

[Veličina] S / M / L / XL

[Karakteristike] Bez lateksa, bez pudera, bez proteina, za obe ruke, za hranu, nesterilne, za jednokratnu upotrebu. Vrh prsta sa teksturom, otporan na ulje i dr., visoka elastičnost, netoksične, otporne na kiselinu.

[Opis proizvoda] Rukavice napravljene od materijala „nitril“. Odlikuje ih čvrstoća i pružaju izuzetnu zaštitu na radu. Ne sterilni materijal, za jednokratnu upotrebu.

[Namjenska upotreba] Za medicinsku ili standardnu upotrebu.

[Upotreba]

1. Prije upotrebe rukavica, uklonite sve ukrase na rukama i podrežite nokte.

2. Izaberite veličinu rukavica prikladne za veličinu ruke. Mokre ruke će otežati nošenje navlačenje rukavica.

3. Ne koristite oštećene rukavice.

4. Ovaj proizvod je samo za jednokratnu upotrebu.

5. Nakon upotrebe odložiti na za to propisano mjesto.


[Uslovi skladištenja] Potrebno je čuvati u hladnom, suvom, provetrenom, ne korozivnom i tamnom okruženju.

[Proizvođač] CRDLIGHT Optoelectronic Technology Co., Ltd.

[Adresa] Floor 1-5 Building No.7 & Floor 1-4 Building No.5, No.18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China

[Distributer] GATARIC DOO, Kninska 48, 74400 Derventa, Bosnia and Herzegovina (+387 53 315 000)

[Website] www.gataric.net

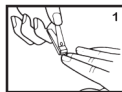

1 Molimo Vas da skratite nokte prije upotrebe rukavica (dugi ili oštri nokti mogu da oštete rukavice)



2 Prilikom navlačenja rukavica pazite da ih ne oštete.



3 Prilikom skidanja rukavica vucite od kraja prema prstima a ne obrnuto.



Čuvati na suvom i hladnom mjestu



Držati dalje od sunčeve svjetlosti



Nesterilne



Bez lateksa



Za jednokratnu upotrebu



Ne koristiti ako su oštećeni pakovanje ili rukavica



Prije upotrebe pregledati uputstvo



MADE IN CHINA

[Назив производа] Нитрилне прегледне рукавице за једнократну употребу
 [Модел] KDNNG02M (ТТС 402383 / ТТС 402384 / ТТС 402385 / ТТС 402386)
 [Величина] S / M / L / XL

[Карактеристике] Без латекса, без пудера, без протеина, за обе руке, за храну, нестерилне, за једнократну употребу. Врх прста са текстуром, отпоран на уље и др., висока еластичност, нетоксичне, отпорне на киселину.

[Опис производа] Рукавице направљен од материјала „нитрил“. Одликује их чврстоћа и пружају изузетну заштиту на раду. Не стерилни материјал, за једнократну употребу.

[Намјенска употреба] За медицинску или стандардну употребу.

[Употреба]

1. Прије употребе рукавица, уклоните све украсе на рукама и подрежите нокте.
2. Изаберите величину рукавица прикладне за величину руке. Мокре руке ће отежати ношење навлачење рукавица.
3. Не користите оштећене рукавице.
4. Овај производ је само за једнократну употребу.
5. Након употребе одложити на за то прописано мјесто.

[Услови складиштења] Потребно је чувати у хладном, сувом, проветреном, не корозивном и тамном окружењу.

[Произвођач] CRDLIGHT Optoelectronic Technology Co., Ltd.

[Адреса] Floor 1-5 Building No.7 & Floor 1-4 Building No.5, No.18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province, China

[Дистрибутер] GATARIC DOO, Книнска 48, 74400 Дервента, Босна и Херцеговина (+387 53 315 000)

[Website] www.gataric.net



1 Молимо Вас да скратите нокте прије употребе рукавица (дуги или оштри нокти могу да оштете рукавице)



2 Приликом навлачења рукавица пазите да их не оштетите.



3 Приликом скидања рукавица вуците од краја према прстима а не обрнуто.)



Чувати на сувом и хладном мјесту



Држати даље од сунчеве свјетлости



Нестерилне



Без латекса



За једнократну употребу



Не користити ако су оштећени паковање или рукавица



Прије употребе прегледати упутство



MADE IN CHINA

[Produktname] Einweg-Nitril-Untersuchungshandschuhe

[Modell] KDNNG02M

[Größe] S/M/L/XL

[Eigenschaften] Latexfrei, Puderfrei, Proteinfrei, Beidhändig tragbar, Lebensmittelecht, Nicht steril, Einmalgebrauch, Fingerspitze strukturiert, ölbeständig, hohe Elastizität, ungiftig, säurebeständig

[Produktbeschreibung] Aus Nitril. Hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit. Nicht steril, Einwegartikel.

[Verwendungszweck] Untersuchungshandschuhe und Schutzhandschuhe

[Verwendung] Bevor Sie Handschuhe aufziehen, entfernen Sie Schmuck an den Händen und schneiden und glätten Sie die Nägel. Nach dem allgemeinen Standard der chirurgischen Desinfektion, sind die Handteile klar zu reinigen, desinfizieren und trocknen. Tragen Sie Handschuhe, die für die individuelle Handgröße geeignet sind. Nasse Hände erschweren das Tragen.

[Beachtung]

1. Tragen Sie beim Tragen von Handschuhen keine Ringe oder anderen Schmuck und halten Sie die Nägel glatt.
2. Bitte wählen Sie Handschuhe, die für Ihre eigene Handgröße geeignet sind.
3. Verwenden Sie keine beschädigten Handschuhe.
4. Dieses Produkt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt, bitte vernichten Sie es nach Gebrauch.
5. Eine zu hohe Temperatur schadet Plastikhandschuhen sehr.


[Lagerbedingungen] Muss in einer kühlen, trockenen, belüfteten, nicht korrosiven dunklen Umgebung gelagert werden.

[Hersteller] CRDLIGHT Optoelectronic Technology Co., Ltd.

[Adresse] Stockwerk 1-5 Gebäude No.7 & Stockwerk 1-4 Gebäude No.5, No.18 Xinyi Road, Jianghai District, Jiangmen City, Provinz Guangdong, China

[Distributeur] GATARIC DOO, Kninska 48, 74400 Derventa, Bosnia and Herzegovina (+387 53 315 000)

[Website] www.gataric.net

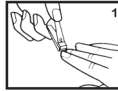

1 Bitte schneiden Sie Ihre Nägel, bevor Sie Handschuhe aufziehen, zu lange oder zu scharfe Fingernägel können Handschuhe leicht beschädigen.



2 Bitte benutzen Sie vor dem Tragen Ihre Fingerpulpe, um ein Verkratzen der Handschuhe zu vermeiden.



3 Handschuhe beim Ausziehen am Handgelenk hochschlagen und bis zu den Fingern ausziehen, nicht aus der Fingerkuppe herausziehen.



Trocken lagern



Von Sonnenlicht fernhalten



Nicht steril



Latexfrei



Nur zur einmaligen Verwendung



Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist



Siehe Anleitung



MADE IN CHINA